

Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510 Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

ESPAÑOL

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre: Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510, Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

USO PREVISTO

Únicamente para uso in vitro. Reactivos para su uso en analizadores NIHON KOHDEN con las combinaciones que se indican en la Tabla 1. Isotonac-4, Hemolynac-310, Hemolynac-510 y Cleanac-710 se han concebido únicamente para su uso con sangre humana. En referencia a su uso previsto, véase la Tabla 2.

ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ TRAS LA PRIMERA APERTURA

Almacenar entre 1 °C y 30 °C. Comprobar la integridad de los reactivos y su fecha de caducidad antes de instalar el dispositivo. Una vez abierto, el reactivo debe usarse antes de la fecha de caducidad que se indica en la Tabla 4. Cuando no se use, cerrar el contenedor con la tapa original, excepto en el caso de Hemolynac-310, Hemolynac-510 y Cleanac-710. No forzar.

COMPONENTES

Ingredientes activos

Ref. Tabla 3

ADVERTENCIAS

Informaciones en las etiquetas

Véase Tabla 5.

Informaciones sobre su eliminación

Los restos del producto, los desechos derivados de su utilización y los recipientes vacíos tienen que ser eliminados respetando las leyes vigentes. Los residuos del instrumento, como las sustancias potencialmente infectas, tienen que ser manipulados con cautela y eliminados en conformidad con las leyes vigentes.

MUESTRA

Los reactivos han sido realizados para su uso con muestras de sangre entera. Para las modalidades de toma y de conservación de las muestras consultar el Manual Operativo del instrumento.

PROCEDIMIENTO

Por lo que se refiere a las modalidades de instalación de los reactivos, de aclarado de las líneas, y para las modalidades de utilización del instrumento se recomienda consultar el Manual Operativo del instrumento. Se aconseja, después de la instalación de un nuevo lote de diluyente o de lixante, verificar el fondo (background), siguiendo lo que se indica en el Manual Operativo del instrumento. Operar con las temperaturas de utilización indicadas en el Manual Operativo del instrumento.

Utilizar todos los productos en sus embalajes originales (no transvasar). Operar de acuerdo con las buenas reglas de laboratorio (GLP). En el caso de que los empalmes previstos en dotación con el instrumento no fueran compatibles, actuar de acuerdo con las buenas reglas de laboratorio (GLP), con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación tanto del ambiente exterior hacia el dispositivo, como del dispositivo hacia el ambiente exterior.

METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL RESULTADO ANALÍTICO

Para las informaciones relativas a los principios de análisis sobre los que se basa la determinación de los distintos parámetros analíticos y a las modalidades de cálculo de los resultados, se invita a consultar el Manual Operativo del instrumento.

CONTROL DE CALIDAD INTERNO

Verificación del background

Después de haber aclarado las líneas del instrumento, verificar el background (cómputo de fondo) según lo indicado en el Manual Operativo del instrumento, y asegurarse de que los valores obtenidos para cada parámetro se encuentren dentro de los límites especificados en el Manual Operativo. En caso de que uno o varios parámetros no se encontraran dentro de dichos límites, proceder en conformidad con las indicaciones del fabricante del instrumento. Si el problema puede atribuirse a uno de los reactivos, sustituir el envase en uso con otro íntegro y repetir la verificación. No llevar a cabo los análisis hasta que los valores de background no sean aceptables.

Llevar a cabo el calibrado y la verificación del calibrado

Se aconseja verificar el calibrado del instrumento en las siguientes condiciones:

1. después de la primera instalación del instrumento
2. por lo menos cada seis meses (o según lo aconsejado por el fabricante del instrumento, en caso de indicaciones más restrictivas)
3. después de una intervención técnica considerada crítica (sustitución de componentes que pudieran influir en las prestaciones instrumentales, upgrade del software, sustitución completa de los reactivos).
4. en el caso de que los datos del control de calidad hubieran detectado un cambio significativo en la perfección de la línea de base (drift), o no entren dentro de los límites de aceptabilidad pre-establecidos.
5. después de la sustitución de lo lixante Hemolynac-3 con lo lixante Hemolynac-3N y viceversa

Antes de llevar a cabo los procedimientos de calibrado, se aconseja efectuar las operaciones de mantenimiento preventivo (verificación de la perfección y de la precisión de la línea de base: ref. documento CLSI H26-A2). El calibrado y la verificación del calibrado del instrumento tienen que ser efectuados utilizando material adecuado (muestras de sangre fresca entera cuyos valores hayan sido asignados con métodos manuales de referencia u oportuno calibrador), siguiendo las indicaciones que se dan en el Manual Operativo del instrumento. En caso de que fuera necesario calibrar el instrumento, se aconseja llevar a cabo la verificación del calibrado inmediatamente después del calibrado mismo, siguiendo todo lo que se indica en el Manual Operativo del instrumento (se aconseja consultar también el documento CLSI H26-A2).

Procedimientos diarios de control de la calidad

Con el objetivo de garantizar la perfección y la fiabilidad de los resultados obtenidos, se recomienda llevar a cabo los procedimientos de control de la calidad conjuntamente con lo indicado en el Manual Operativo del instrumento, utilizando material de control adecuado (muestras de sangre fresca entera de pacientes o sangre de control estabilizada adecuada), inmediatamente antes, durante e inmediatamente después de cada secuencia de análisis. Se aconseja utilizar dos niveles diferentes de sangre de control estabilizada (se remite al documento CLSI H26-A2)

BIBLIOGRAFIA

1. Validation, Verification, and Quality Assurance of Automated Hematology Analyzers; Approved Standard – Second Edition, CLSI Document H26-A2, Vol. 30, No. 14, 2010.
2. Health Care Financing Administration. Clinical Laboratory Improvement Amendments of 1998; Final Rule. Federal Register, Vol. 57, [42 CFR § 493.1217, 493.1218], 1992.

Fecha de publicación: 4 de enero de 2017



NIHON KOHDEN FIRENZE S.r.l
Via Torta, 72/74 - 50019 Sesto Fiorentino-Firenze, Italy
Tel +39 055 3045 1 - Fax +39 055 308548




SIMBOLI/SYMBOLS/SIMBOLOS/SYMBOLE/SYMBOLS/ОБОЗНАЧЕНИЯ/SÍMBOLOS



Consultare le istruzioni operative
Consult operating instructions las
instrucciones operativas
Consultar In den Gebrauchsanweisungen nachschlagen
Consulter les instructions d'utilisation
См. инструкции по эксплуатации
Consultar as instruções de funcionamento



Tenere al riparo dalla luce
Keep away from sunlight
Mantener reparado de la luz
Dunkel aufbewahren
Conserver à l'abri de la lumière du soleil
Беречь от попадания солнечных лучей
Manter afastado da luz solar

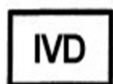

Dispositivo diagnostico in vitro
In vitro diagnostic medical device
Dispositivo diagnóstico in vitro
In-vitro-Diagnostikum
Dispositif médical de diagnostic in vitro
Медицинское изделие для диагностики In vitro
Dispositivo médico de diagnóstico In vitro



Non usare ganci
Use no hooks
No usar ganchos
Keine Haken verwenden
N'utiliser aucun crochet
Не использовать крюки
Não utilizar ganchos



Utilizzare entro
Use by
Utilizar antes de
Verwendbar bis
Utiliser avant
Использовать до
Utilizar até



e.g.) five-stack

Limiti di impilamento
Stacking limitation
Límites de apilado
Maximale Stapelhöhe
Limitation d'empilement
Ограничение по штабелированию
Limite de empilhamento



Lotto
Batch code
Lote
Lot-Nr.
Code du lot
Код партии
Código de lote



Teme l'umidità
Keep dry
Teme la humedad
Vor Feuchtigkeit schützen
Craint l'humidité
Беречь от влаги
Manter seco



Codice
Catalogue number
Código
Kenn-Nr.
Numéro de référence
Номер в каталоге
Número de catálogo



Alto
This way up
Arriba
Oben
Sens du chargement
Вверх
Para cima



Fabbricante
Manufacturer
Fabricante
Hersteller
Fabricant
Изготовитель
Fabricante



Limite di temperatura
Temperature limitation
Límite de temperatura
Temperaturgrenzwerte
Limites de température
Ограничение по температуре
Limite de temperatura



Fragile, maneggiare con cura
Fragile, handle with care
Frágil, manipular con cuidado
Vorsicht zerbrechlich
Fragile, manipuler avec soin
Хрупкое, обращаться осторожно
Frágil, manusear com cuidado



Isotonac·3, Isotonac·4, Hemolynac·3, Hemolynac·3N, Hemolynac·5, Hemolynac·310, Hemolynac·510 Cleanac·3, Cleanac, Cleanac·710

TABELLE/TABLES/TABLAS/TABELLEN/TABLEAUX/ТАБЛИЦЫ/TABELAS

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 1

reagenti/reagents reactivos/Reagenzmittel/réactifs реагенты/reagentes				strumenti/instruments/instrumentos Geräte/instruments анализаторы/ instrumentos					
nome/name nombre/Name nom наименование nome	REF	descrizione/description descripción/Beschreibung description/описание descrição	unità di vendita/packaging unidades de venta/handelsübliche Packungsgröße/unités de vente упаковка/embalagem	Nihon Kohden MEK-					
				8118K	6318J/K	6400J/K 6410J/K 6420J/K 6500J/K 6510J/K	8222J/K 7222J/K	7300J/K	9100
Isotonac·3	MEK-640 I	diluyente/diluent/diluyente/ Verdünnungsmittel/diluent/ разбавитель/diluyente	20 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Isotonac·4	MEK-641 I		20 L	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hemolynac·3	MEK-660 I	lisante/lysing reagent/lixante/Lösungsmittel/ agent de lyse/лизирующий реагент/ reagente de lise	1 L	✓	✓		✓		
Hemolynac·3N	MEK-680 I		1 L		✓ *	✓	✓ *	✓	
Hemolynac·5	MEK-910 I		1 L				✓	✓	
Hemolynac·310	MK-310WI		250 ml						✓
Hemolynac·510	MK-510WI		250 ml						✓
Cleanac·3	MEK-620 I	detergente/detergent/detergente/ Reinigungsmittel/agent de nettoyage/моющее средство/ agente de limpeza	1 L	✓	✓ **	✓ ****	✓	✓	
Cleanac	MEK-520 I		5 L		✓ ***	✓	✓	✓	
Cleanac·710	MK-710WI		3 L						✓

* reagente alternativo a/alternative reagent for/reactivo alternativo a/Reagenzmittel-Alternative zu/réactif alternatif à/заменяющий реагент для реагента/ reagente alternativo Hemolynac·3 (MEK-660 I)
 ** con/with/con/mit/avec/c реагентом/com Hemolynac·3 (MEK-660 I)
 *** con/with/con/mit/avec/c реагентом/com Hemolynac·3N (MEK-680 I)
 **** per una pulizia intensiva/for strong cleaning/para la limpieza intensiva/für eine Intensivreinigung/pour le nettoyage intensif/для усиленной очистки/para limpeza intensiva

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 2

reagenti/reagents reactivos/Reagenzmittel réactifs/реагенты/ reagentes		destinato per/Intended for/destinado a bestimmt für/destiné à назначение/ Destinado a	
nome/name Nombre/Name nom наименование nome	REF	diagnostica in vitro (umano) in vitro diagnostic (human) para diagnóstico <i>in vitro</i> (humano) In-vitro-Diagnostik (Mensch) diagnostic in vitro (humains) диагностика in vitro (человек) diagnóstico in vitro (humano)	analisi veterinarie (animali) veterinary analysis (animal) análisis veterinarios (animales) Veterinärdiagnostik (Tier) analyses vétérinaires (animaux) ветеринарный анализ (животные) análise veterinária (animal)
Isotonac·3	MEK-640 I	✓	✓
Isotonac·4	MEK-641 I	✓*	N/A
Hemolynac·3	MEK-660 I	✓	✓
Hemolynac·3N	MEK-680 I	✓	✓
Hemolynac·5	MEK-910 I	✓	✓
Hemolynac·310	MK-310WI	✓	N/A
Hemolynac·510	MK-510WI	✓	N/A
Cleanac·3	MEK-620 I	✓	✓
Cleanac	MEK-520 I	✓	✓
Cleanac·710	MK-710WI	✓	N/A

* Isotonac·4 non deve essere utilizzato per le analisi veterinarie/Isotonac·4 must not be used for veterinary analysis
 Isotonac·4 no debe utilizarea para análisis veterinarios/Isotonac·4 darf nicht für die Veterinärdiagnostik verwendet werden
 Isotonac·4 ne doit pas être utilisé pour des analyses vétérinaires/Изотонак·4 не используется для проведения ветеринарных анализов
 Isotonac·4 não pode ser utilizado para análise veterinária

**Isotonac·3, Isotonac·4, Hemolynac·3, Hemolynac·3N, Hemolynac·5, Hemolynac·310, Hemolynac·510
Cleanac·3, Cleanac, Cleanac·710**

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 3

reagenti/reagents reactivos/Reagenzmittel réactifs/реагенты reagentes		ingredienti attivi/active ingredients ingredientes activos/wirksame Bestandteile ingrédients actifs/активные компоненты principios activos	
nome/name nombre/Name nom наименование nome	REF	nome/name nombre/Name nom наименование nome	contenuto/content contenido/Inhalt contenu/состав conteúdo
Isotonac·3	MEK-640 I	Sodio cloruro/Sodium chloride/Cloruro de sodio Natriumchlorid Chlorure de sodium/Хлорид натрия Cloreto de sódio	4,4 g/L
		Sodio solfato anidro/Sodium sulphate anhydrous/Sulfato de sodio anhidro/Natriumsulfat wasserfrei Sulfate de sodium anhydre/Сульфат натрия безводный/Sulfato de sódio anidro	9,7 g/L
Isotonac·4	MEK-641 I	Sodio cloruro/Sodium chloride Cloruro de sodio/Natriumchlorid Chlorure de sodium/Хлорид натрия Cloreto de sódio	4,0 g/L
		Sodio solfato anidro/Sodium sulphate anhydrous Sulfato de sodio anhidro/Natriumsulfat wasserfrei Sulfate de sodium anhydre/Сульфат натрия безводный/Sulfato de sódio anidro	9,8 g/L
Hemolynac·3	MEK-660 I	Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли/Sais de amónio quaternário	37,2 g/L
		Potassio cianuro/Potassium cyanide Cianuro de potasio/Kaliumcyanid Cyanure de potassium/Цианид калия Cianeto de potássio	0,4 g/L
Hemolynac·3N	MEK-680 I	Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли Sais de amónio quaternário	37,2 g/L
Hemolynac·310	MK-310WI	Sali di ammonio quaternario/Quaternary ammonium salts Sales cuaternarias de amonio/Quartäre Ammoniumverbindung Sels d'ammonium quaternaire/Четвертичные аммониевые соли Sais de amónio quaternário	27,0 g/L
Hemolynac·510	MK-510WI	Sodio alchiletere solfato/Sodium alkyl ether sulphate Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата натрия/Alquil éter sulfato de sódio	1 g/L
Hemolynac·5	MEK-910 I	Sodio alchiletere solfato/Sodium alkyl ether sulphate Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата натрия/Alquil éter sulfato de sódio	1 g/L
Cleanac·3	MEK-620 I	Ipoclorito di sodio (% cloro attivo)/Sodium hypochlorite (% active chlorine) Hipoclorito de sodio (% cloro 10ctive)/Natriumhypochlorit (% Cl aktiv) Hypochlorite de sodium (% Cl actif)/Гипохлорит натрия (% активного хлора)/Hipocloreto de sódio (% de cloro 10ctive)	1 – 1,5 % p/v – w/v p/v – w/v p/v
Cleanac	MEK-520 I	Poliossietilen tridecil etere/Polyoxyethylene tridecyl ether Eter tridecílico polioxi-etilenado/Isotridecanol, ethoxyliert Tridécyl éther ou Polyoxuéthylène Полиоксиэтилен тридециловый эфир/Éter tridecílico de polioxi-etileno	0,5 g/L
Cleanac·710	MK-710WI	Sodio alchiletere solfato/Sodium alkyl ether sulphate Alquil éter sulfato de sodio/Natriumalkylethersulfat Alkyl éther sulfate de sodium/Алкилэфир сульфата натрия/Alquil éter sulfato de sódio	0,7 g/L

Isotonac-3, Isotonac-4, Hemolynac-3, Hemolynac-3N, Hemolynac-5, Hemolynac-310, Hemolynac-510
Cleanac-3, Cleanac, Cleanac-710

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 4

<i>reagenti/reagents reactivos/Reagenzmittel réactifs/реагенты reagentes</i>		<i>scadenza dopo prima apertura/expiry after first opening caducidad tras la primera apertura/nach dem ersten Öffnen mindestens haltbar für expiration après ouverture/срок годности после вскрытия упаковки validade após a primeira abertura</i>	
nome/name nombre/Name nom наименование nome	REF	giorni/days días/Tage jours дни/dias	
Isotonac-3	MEK-640 I	60	
Isotonac-4	MEK-641 I	60	
Hemolynac-3	MEK-660 I	30	
Hemolynac-3N	MEK-680 I	90	
Hemolynac-5	MEK-910 I	30	
Hemolynac-310	MK-310WI	90	
Hemolynac-510	MK-510WI	90	
Cleanac-3	MEK-620 I	90*	30**
Cleanac	MEK-520 I	180	
Cleanac-710	MK-710WI	90	

* Cleanac-3 può essere utilizzato con scadenza a 90 giorni dopo prima apertura mediante l'utilizzo del kit di allaccio codice YZ-001B7 (T464D) a partire dal lotto 0000783360 AB compreso e con bottiglia tenuta all'interno dell'originale scatola in cartone/Cleanac-3 can be used for 90 days after first opening, only with the tube assay YZ-001B7 (T464D) starting from LOT 0000783360 AB and subsequent lots and kept in the original carton box/Cleanac-3 puede usarse durante 90 días una vez abierto, únicamente con el tubo de ensayo YZ-001B7 (T464D) desde el LOTE 0000783360 AB y los lotes siguientes, conservándolo en la caja de cartón original/Cleanac-3 kann nach erstmaligem Öffnen 90 Tage lang verwendet werden, sofern es im Originalkarton verbleibt und der Verbindungsschlauch YZ-001B7 (T464D) ab einschließlich LOT 0000783360 AB und höher benutzt wird/Cleanac-3 peut être utilisé pendant 90 jours après sa première ouverture, uniquement avec le tube de dosage YZ-001B7 (T464D) à partir de LOT 0000783360 AB, ainsi que les lots suivants conservés dans la boîte en carton d'origine/Cleanac-3 можно использовать в течение 90 дней после вскрытия упаковки только с пробиркой для анализов YZ-001B7 (T464D) начиная с ПАРТИИ 0000783360 AB и последующих партий. Средство надлежит хранить в оригинальной картонной коробке/Pode utilizar o Cleanac-3 durante 90 dias após a primeira abertura, apenas com o conjunto de tubo YZ-001B7 (T464D) a partir do lote LOT 0000783360 AB e posteriores e mantido na caixa de cartão original.

** Cleanac-3 viene utilizzato con scadenza a 30 giorni dopo prima apertura mediante l'utilizzo del kit di allaccio codice YZ-001B7 (T464D) con lotti precedenti al lotto 0000783360 AB escluso/Cleanac-3 is used for 30 days after first opening with the tube assay YZ-001B7 (T464D) with previous LOT 0000783360 AB/Cleanac-3 puede usarse durante 30 días una vez abierto, con el tubo de ensayo YZ-001B7 (T464D) con el anterior LOTE 0000783360 AB/Cleanac-3 kann nach erstmaligem Öffnen 30 Tage lang verwendet werden, falls der Verbindungsschlauch YZ-001B7 (T464D) bis LOT 0000783360 AB benutzt wird/Cleanac-3 s'utilise pendant 30 jours après sa première ouverture avec le tube de dosage YZ-001B7 (T464D) avec les lots précédant LOT 0000783360 AB/Cleanac-3 надлежит использовать в течение 30 дней после вскрытия упаковки с пробиркой для анализов YZ-001B7 (T464D) с предыдущей ПАРТИЕЙ 0000783360 AB/O Cleanac-3 é utilizado 30 dias após a primeira abertura, com o conjunto de tubo YZ-001B7 (T464D) e com o lote anterior LOT 783360 AB.

Tabella/Table/Tabla/Tabelle/Tableau/Таблица/Tabela 5

nome/name nombre/Name nom наименование nome	REF	<i>informazioni sull'etichettatura/information on labelling informaciones en las etiquetas/Informationen zur Etikettierung information sur l'étiquetage/информация о маркировке informações sobre etiquetas</i>
Isotonac-3 Isotonac-4 Hemolynac-3 Hemolynac-3N Hemolynac-5 Hemolynac-310 Hemolynac-510 Cleanac Cleanac-710	MEK-640 I MEK-641 I MEK-660 I MEK-680 I MEK-910 I MK-310WI MK-510WI MEK-520 I MK-710WI	Etichetta di pericolo ai sensi del regolamento 1272/2008 (CLP) non richiesta come da art. 1,5,d) CLP No hazard label required according to 1272/2008 regulation (CLP) art. 1,5,d) No se requiere etiqueta de peligro según el artículo 1,5,d) del reglamento 1272/2008 (CLP) Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP) nicht erforderlich gemäß Art. 1,5,d) CLP L'étiquette de danger conformément au règlement 1272/2008 (CLP) n'est pas requise aux termes de l'article 1,5,d) du CLP знак опасности не требуется согласно регламенту 1272/2008 (CLP) ст. 1,5,d) Rótulo de perigo nos termos do regulamento 1272/2008 (CLP) não exigido, como consta do art. 1,5,d) (CLP)
Cleanac-3	MEK-620 I	Etichetta di pericolo ai sensi del regolamento 1272/2008 (CLP) non richiesta come da art. 1,5,d) CLP. Ingredienti attivi: Ipoclorito di Sodio (%Cl Attivo) 1-1,5%(p/v) NON mescolare con acidi – Etichettatura per il trasporto: UN 1791 PG III – Hypochlorite solution in limited quantity No hazard label required according to 1272/2008 regulation (CLP) art. 1,5,d). Active ingredients: Sodium Hypochlorite (%Cl active) 1-1,5% w/v. Do NOT mix with acid – Shipment labelling: UN 1791 PG III – Hypochlorite solution in limited quantity No se requiere etiqueta de peligro según el artículo 1,5,d) del reglamento 1272/2008 (CLP). Ingredientes activos: hipoclorito de sodio (%Cl activo) 1-1,5% p/v). NO mezclar con ácidos – Etiqueta para el transporte: UN 1791 PG III. Solución de hipoclorito en cantidad limitada Gefahrenkennzeichnung gemäß Verordnung 1272/2008 (CLP) nicht erforderlich gemäß Art. 1,5,d) CLP. Wirkstoffe: Natriumhypochlorit (% aktives Cl) 1-1,5 % w/v. NICHT mit Säure mischen – Transportkennzeichnung: UN 1791 PG III – Hypochloritlösung in begrenzter Menge L'étiquette de danger conformément au règlement 1272/2008 (CLP) n'est pas requise aux termes de l'article 1,5,d) du CLP. Ingrédients actifs : Hypochlorite de sodium (% Cl actif) 1-1,5 % p/v – NE PAS mélanger avec des acides. Étiquetage pour le transport : UN 1791 PG III – Solution d'hypochlorite en quantité limitée знак опасности не требуется согласно регламенту 1272/2008 (CLP) ст. 1,5,d). Активный состав: Гипохлорит натрия (%Cl активный) 1-1,5% w/v. НЕ смешивать с кислотами – Маркировка для перевозки: UN 1791 PG III – Гипохлорит натрия в ограниченном количестве Rótulo de perigo nos termos do regulamento 1272/2008 (CLP) não exigido, como consta do art. 1,5,d) (CLP). Ingredientes ativos: Hipoclorito de Sódio (%Cl Ativo) 1-1,5%(p/v) NÃO misturar com ácidos – Rotulagem para o transporte: UN 1791 PG III – Solução de hipoclorito em quantidades reduzidas